


Lectura de resultados

El espacio de lectura del casete cuenta con las letras **C y T**

Si se colorean las líneas de las **letras C y T**, el resultado **es positivo**

Si se colorea **solo** la línea de la **letra C**, el resultado **es negativo**

Si no se colorea **ninguna de las letras**, o **solo** la línea de la **letra T**, el **resultado es inválido**. Deberás realizar un nuevo test

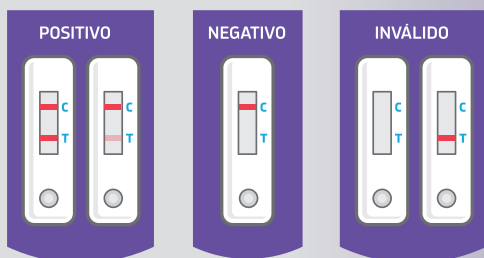

Descarte del kit


Colocá todos los elementos en una bolsa plástica, cerrá y descartá junto a la basura no degradable



Guía para realizar el autotest de COVID-19

Ministerio de
SALUD

GOBIERNO DE
CÓRDOBA
ENTRE TODOS

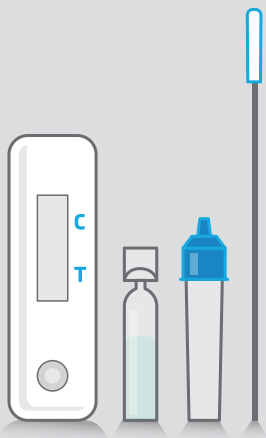


Elementos del kit:


- Casete de lectura
- Ampolla con líquido reactivo
- Tubo con tapa gotero
- Hisopo

¿Cómo recolectar la muestra?

- A** Cortá el extremo de la ampolla y colocá todo su líquido dentro del tubo
- B** Sonate la nariz antes de comenzar

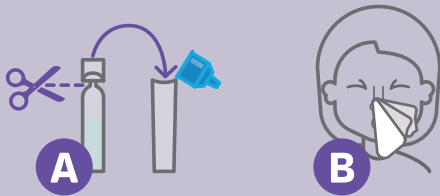


- C** Introducí el hisopo en una fosa nasal unos 2,5 cm y giralo 5 vueltas. Repetí el procedimiento en la otra fosa nasal
- D** Retirá el hisopo de tu nariz

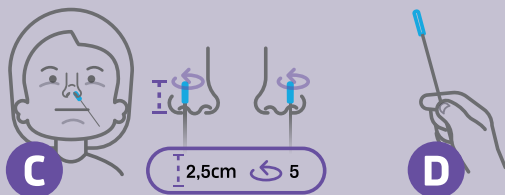

¿Cómo preparar la muestra?

- A** Insertá el hisopo en el tubo con líquido reactivo y giralo 10 veces haciendo presión hacia abajo
- B** Apretá el tubo con tus dedos para exprimir la cabeza del hisopo o recortá la varilla del hisopo al ras del tubo y dejalo dentro
- C** Colocá la tapa gotero al tubo

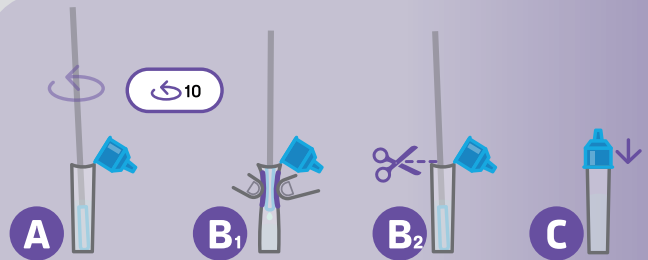

¿Cómo procesar la muestra?

- A** Extraé el casete de lectura de su envase sellado y apoyá sobre una superficie seca y plana
- B** Utilizá el tubo con tapa gotero, para colocar en el orificio del casete la cantidad de gotas indicadas
- C** Esperá 15 minutos para leer el resultado

